

ortho[®]
künzli 



bewegt die Heilung

Künzli

Standhaft Schweizerisch und fortschrittlich erfinderisch

Seit 1927 stellt Künzli Schuhe her. Innovative und wegweisende Schuh-Erfindungen prägen Tradition und Geschichte der kleinen, aber feinen Schweizer Schuhfabrik.

Schuh-Besonderheiten nehmen Gestalt an, original und einzigartig sollen sie sein, Schweizerisch in Form und Funktion, das Anspruchsvolle erfüllen.

Das Künzli Schuh-Wissen ist über Schuh-generationen gewachsen, hochspezialisiert in Schuhtechnik und gekonnt im Handwerk. Aus lebendiger Überzeugung entstehen die Schuhe in der eigenen Fertigung in Windisch im Kanton Aargau. Hochwertige Leder und erstklassige Rohwaren werden in sorgfältiger Handarbeit verarbeitet. Service wird im Künzli Team hochgehalten, mit Freude und Engagement mit Menschen und Schuhen umgegangen.

Unverkennbar einzigartig zeichnen 5 Klötzli die Künzli Schuhe und stehen ein für Swissmade Qualität.

Künzli Ortho®

Bewegt die Heilung

Ein Paar Künzli Ortho® Stabilschuhe ist die führende Therapie bei Verletzungen von Bändern, Sehnen und Knochen am Fuss. Die Verletzung wird ruhig gestellt, stabilisiert und doch bleibt der Patient mobil. Künzli Ortho® hilft schneller heilen und bewahrt vor ernsten Folgeschäden.

Das Ortho® System tut, was die Medizin verlangt: der hohe Schuh mit integrierten Stabilisatoren sichert das richtige Mass an Ruhigstellung, die 3-geteilte Schnürung hält den Fuss von schädlicher Rotation ab, die Therapiesohle sorgt für kraftarmen Gang. So hat die Verletzung heilende Ruhe. Muskeln und Stoffwechsel aber bringt der Schuh im Ortho® in aktivierende Bewegung zur Beschleunigung der Heilung. Das Paar Schuhe an beiden Füßen heilt in symmetrischem Gang ohne Haltungs- und Statikschäden.

Laut medizinischer Studien sparen frühfunktionell verwendete Künzli Ortho® Wochen [und Kosten] in der Rehabilitation. Laut Forschung schützen sie vor Langzeitschäden wie der Arthrose.

Spezifisch und von Spezialisten entwickelt, therapiert Künzli Ortho® bei allen Indikationen rund um Fuss und Sprunggelenk, ob postoperativ oder konservativ angewendet, für akute Verletzungen, chronische Beschwerden oder Langzeitschäden.

Künzli Ortho® ist designed zur Therapie und hilfreich für Schutz und Vorsorge. Vielfältige Modelle passen im Look und an jeden Typ Fuss. Das Mass der Schuhe vom Erfinder der Stabilschuhe.

Inhalt

Indikationen	04
Therapiekonzept frühfunktionelle Stabilität	05
Vorteile Künzli Ortho® Stabilschuhe	06
Technische Komponenten Ortho® System	07
Ortho® Spezialmodelle	08
Ortho® Standardmodelle	14
Übersicht Modelle, Artikelnummern	23



Weitere Informationen finden Sie auf

www.kuenzli-schuhe.ch/ortho

Oder im Künzli Ortho® Ordner mit detaillierten
Erläuterungen und Zusatzinformationen.

Indikationen

Achillessehnenriss -
Achillessehnenruptur

Fersenbeinbruch -
Calcaneusfraktur

Bänderriss - Bandruptur
Verstauchung - Distorsion
Bandrekonstruktion
Knöchelbruch - Knöchelfraktur - Malleolarfraktur
Sprunggelenkersatz - Sprunggelenkprothese
Gelenkversteifung - Arthrodeese

Vorfußprobleme

Spastische oder schlaffe Lähmungen



Therapiekonzept

Frühfunktionelle Stabilität

Ortho® Stabilschuhe kombinieren auf geniale Weise zwei elementare Behandlungsziele:

Stabilität


Die Verletzung wird vom Ortho® System stabilisiert:

- Limitierte Inversion und Eversion
- Reduzierte Plantar- und Dorsalextension
- Eingeschränkte Rotationsbewegungen



Mobilität

Der Patient bleibt mobil mit der nötigen Sicherheit beim Gehen. Die frühfunktionelle Behandlung beschleunigt den Heilungsverlauf. Das Gehen mit dem Paar Schuhe regt den Stoffwechsel an und aktiviert die Muskeln.

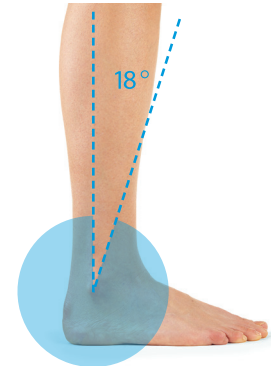

Abrechnungsinformationen

Schweiz:

SUVA anerkannt

OSM-/SVOT-Tarif

Migel-Nr.: 23.01.04.00.1

Deutschland:

HiMi-Nr. für alle Modelle, wo möglich

Vorteile Künzli Ortho® Stabilschuhe

Optimale Stabilisierung (vs. Tape, Bandagen, Schienen)

«...höchster Stabilisierungseffekt...»; « ...nur der Stabilschuh [Künzli]...»

Weniger Langzeitschäden

«Chronische Instabilität ... dürfte Folge mangelnder Stabilisierung sein.»

Schnellere Heilung (Bänderverletzungen, Achillessehnenrekonstruktion)

«um 14,8 Tage beschleunigen»; «kürzerer Arbeitsausfall ... [30 Tage] ...»

Reduzierte Gesamtbehandlungskosten

weniger Arbeitsausfall, weniger Medikamente

Mehr Komfort

- Hoher Tragekomfort
- Sicherheit beim Gehen
- Komfortabler Einstieg
- Einfaches Anlegen
- Einfache Körperhygiene und Wundbehandlung
- Angenehmes Fuss-Klima dank hochwertigem, hydrophobiertem Leder

Überlegen gegenüber Gips/Hartplastikverbänden/Orthesen

- Reduzierte Thrombosebehandlung
- Erhalt der Körperstatik und der physiologischen Gangsymmetrie
- Kein voluminöser, hinderlicher Verband
- Hohe Mobilität im Alltag
- Grosser Einsatzbereich durch Vielfalt an Modellen



Technische Komponenten

Ortho® System

Das Ortho® System wurde von Künzli erfunden, patentiert und stetig weiterentwickelt.

Es besteht aus drei Komponenten:

Stabilisatoren,
Schnürung,
Therapiesohle.

Stabilisatoren - Stabilisierung Sprunggelenk

2 integrierte Stabilisatoren sichern das Sprunggelenk von beiden Seiten. Sie sind auswechsel- und thermoverformbar.



Schnürung - Sitz am Fuss und Rotationsstabilität

■ 3-teiliges Schnürsystem*

Erlaubt eine individuelle Feineinstellung. Optimiert die Passform dank präziser Umfassung. Ist weit nach vorne gezogen, damit sich der Schuh weit öffnen lässt und der Fuss in nahezu neutraler Position einsteigen kann.



■ Elastisches Band*

Ermöglicht eine individuelle Zugverteilung über den Rist. Sorgt für Halt im Vorfuss dank integriertem Stopp.



■ Fersenriemen*

Garantiert direkten Fersenzug für optimalen Fersenhalt.

Therapiesohle - Kontrolliertes Gangbild

Die physiologische Form der Therapiesohle unterstützt den kraftarmen Abrollvorgang. Der Auftreffwinkel beim Aufsetzen wird durch die Sohle optimiert. Der Sohlenaufbau ist geeignet für orthopädische Zurichtungen.



* 5-Streifen Schnürung wird fortlaufend auf allen Modellen ersetzt

Übersicht Spezialmodelle

Ortho Rehab Total	Ortho Rehab 3	Ortho Open	Ortho Sandale
45610	45580	45600	45590
HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.1001	HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.2011	HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.0013	HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.0012



Indikationen

Konservative oder postoperative Behandlung nach Achillessehnenrupturen

Operativer Behandlung von Achillessehnentendinopathien, Haglund-Exostosen

Bei chronischen Achillessehnenbeschwerden.

Postoperativer Einsatz nach Bandnaht/-rekonstruktionen, Malleolarfrakturen, Korrekturosteotomien, Arthrodesen, Arthroplastik

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose).

Einsatz bei diversen Geburtsbrechen

Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Einsatz bei spastischen und schlaffen Lähmungen

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose).

Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Einsatz bei spastischen und schlaffen Lähmungen

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose).

Ortho® Spezialmodelle



Ortho Rehab Total

Art.-Nr.	45610
Grösse	3 – 14 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	G / J
Hauptindikation	Konservative oder postoperative Behandlung nach Achillessehnenrupturen
Besonderes	Vorder- und Hintereinstieg, Spitzfussstellung durch mitgelieferte Keile, Rindleder (glatt/Nubuk)
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.1001



Versorgungskonzept zu
Ortho Rehab Total auf Seite 10

Ortho® Spezialmodelle

Fortsetzung Ortho Rehab Total -

Versorgungskonzept

Bei jedem Paar Schuhe liegen zwei verschiedene Keile bei, um die für die Rehabilitation wichtige Spitzfussstellung zu gewährleisten. Die Keil-Versorgung findet entsprechend dem Heilungsverlauf in vier Phasen statt (siehe Abbildungen rechts).

Die Schuhe, wie auch die Keile sind immer beidseitig zu tragen. Dadurch ist das Gangbild symmetrisch und ein Hüftschiefstand wird vermieden.

Je nach Behandlungskonzept bekommt der Patient einen leichten Gips angepasst. Dieser ist in der ersten Phase im Schuh zu tragen und während dem ganzen Heilungsprozess als Nachtschiene für den 24h Schutz.

Keilversorgung

Schuh-Grösse 3–6: 10mm + 20mm

Schuh-Grösse 7–13: 15mm + 25 mm

(oder 10mm + 20mm aufgrund ärztlicher Verordnung)

Phase 1

Decksohle + dicker Keil + dünner Keil



Phase 2

Decksohle + dicker Keil



Phase 3

Decksohle + dünner Keil



Phase 4

nur Decksohle



Ortho® Spezialmodelle



Ortho Rehab 3

Art.-Nr.	45580
Grösse	3 – 14
Weite / Leisten	G / J
Hauptindikation	Postoperativer nach Bandnaht/-rekonstruktionen, Malleolarfrakturen, Korrekturosteotomien, Arthrodese, Arthroplastik
Besonderes	Kombi-Verschluss-System, Rindleder (glatt/Nubuk)
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.2011



Ortho® Spezialmodelle



Ortho Open

Art.-Nr.	45600
Grösse	3 – 14 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	G / J
Hauptindikation	Diverse Geburtsgebrechen, spastische und schlaffe Lähmungen
Besonderes	Vollständige Öffnung bis zur Fussspitze, Rindleder (glatt/Nubuk)
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0013



Ortho® Spezialmodelle



Ortho Sandale

Art.-Nr.	45590
Grösse	36 – 48 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	I / SA
Hauptindikation	Diverse Geburtsgebrechen, spastische und schlaffe Lähmungen
Besonderes	Sandalenschnitt in Naturfussform Bearbeitbare Innensohle, Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0012



Übersicht Standardmodelle

Indikationen

Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)

Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose)

Postoperativer Einsatz nach Bandnaht/-rekonstruktionen, Malleolarfrakturen, Korrekturosteotomien, Arthrodese, Arthroplastik

Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen

Prophylaktisch bei Extrembelastungen (Arbeit, Sport)

Alltag Freizeit	Arbeit	Nacht Weitere Modelle
Grundformen Weite Medium (G) Ortho Standard Ortho Sportive S.15	Mit Stahlkappe und Stahlsohle Safe3O Seite 20 (DIN EN ISO 20345 zertifiziert)	Nachtversorgung – 24h Schutz Ortho Nacht Seite 22
		
Grundform mit Klettverschluss Ortho Klett Seite 15	Stahlkappe/durchtrittssicher/Weite Large (K) Safe3Omax Seite 20	Wandern Ortho Safari Seite 19
		
Damenschnitt Weite Small (F) Ortho Donna Seite 16	Mit Stahlkappe Rocky Stahl Seite 21	Business Ortho Classic Seite 19
		
Naturschuhform Weite Large (I) Ortho Volume Seite 16	Ohne Stahlkappe Rocky Rocky Hoch Seite 21	Kinder Ortho Junior Seite 22
		
Tiefere Schafthöhe Black Pro Plus Ortho Top Seite 17		
		
Sommer- und Wintermodelle Ortho Air -Aero -Eskimo Seite 18		
		

Ortho[®] Standardmodelle Alltag | Freizeit

Ortho Standard

Art.-Nr.	45597
Grösse	2 – 15
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Basismodell, Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0003



Ortho Sportive

Art.-Nr.	40595
Grösse	2 – 14
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Basismodell, helle Sportsohle mit Band, Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0005



Ortho Klett

Art.-Nr.	45592
Grösse	3 – 14
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Basismodell mit Klettverschluss, Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	beantragt



Ortho® Standardmodelle Alltag | Freizeit

Ortho Donna

Art.-Nr.	45570
Grösse	2 – 9
Weite / Leisten	F / TF
Besonderes	Schmaler, femininer Schnitt, Rindleder (glatt / Nubuk)

HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.0007

Ortho Volume

Art.-Nr.	45598
Grösse	36 – 49 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	I / SA
Besonderes	Extra breiter Schnitt, Naturfussform mit grossem Zehenraum, Rindleder

HiMi-Nr. (DE) 31.03.03.0004



Ortho® Standardmodelle

Alltag | Freizeit

Black Pro Plus

Art.-Nr.	40593
Grösse	2 1/2 – 13
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Reduzierte Schafthöhe (vs. Ortho Standard) Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0009

Ortho Top

Art.-Nr.	45595
Grösse	4 – 13 1/2
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Reduzierte Schafthöhe (vs. Ortho Standard), helle Sportsohle mit Band, Rindleder (Nubuk), Lederfutter
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0010



Ortho® Standardmodelle Alltag | Freizeit

Ortho Air

Art.-Nr.	45594
Grösse	3 – 13
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Stabilschuh für den Sommer, perforiertes Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0005

Ortho Aero

Art.-Nr.	45596
Grösse	2 – 14
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Stabilschuh für den Sommer, perforiertes Rindleder, Lederfutter
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0005

Ortho Eskimo

Art.-Nr.	45581
Grösse	3 – 13
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Stabilschuh für den Winter, Thermofutter, Rindleder
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0008



Ortho® Standardmodelle Business | Wandern

Ortho Classic

Art.-Nr.	45582
Grösse	36–47 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	H / VZ
Besonderes	klassischer, unauffälliger Stabilschuh, Stabilisatoren nicht austauschbar, Rindleder, Lederfutter

Ortho Safari

Art.-Nr.	45121
Grösse	3–13
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Wander-Stabilschuh mit Profilsohle, Rindleder, Lederfutter
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0011



Ortho® Standardmodelle

Arbeit – mit Zertifizierung

Arbeitssicherheits-Schuhe müssen zunehmend vorgeschriebene Grundlagen erfüllen. Diese sind anhand der Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (89/686/EWG) geregelt und werden durch eine zertifizierte Prüfstelle kontrolliert. Bei erfolgreicher Prüfung wird eine EG-Baumusterbescheinigung ausgestellt und die Schuhe entsprechend gekennzeichnet.

Die zertifizierten Arbeitssicherheits-Schuhe von Künzli kombinieren Stabilität für die medizinische Therapie mit zertifizierter Sicherheit nach EN ISO 20345 (inkl. Zusatzanforderungen S3). Um orthopädische Schuh-Anpassungen (Zurichtungen, Einlagen) vornehmen zu können, gelten baumustergeprüfte Fertigungsanweisungen und Materialvorschriften.

Weitere Informationen finden Sie auf www.kuenzli-schuhe.ch/ortho unter Produkte.

Safe3O

DIN EN ISO 20345 zertifiziert

Art.-Nr.	45140
Grösse	37 – 49 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	G / STA
Besonderes	Strapazierfähiger Arbeits-Stabilschuh, Stahlkappe und durchtrittssicherer Stahleinlage (S3 zertifiziert), antistatisch, Laufsohle oel- und benzinfest, Rindleder

Safe3Omax

(Im Zertifizierungsprozess)

Art.-Nr.	45145
Grösse	39 – 49 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	K / MX
Besonderes	Strapazierfähiger Arbeits-Stabilschuh, Stahlkappe und durchtrittssichere Textilbrandsohle, antistatisch, Laufsohle oel- und benzinfest, Rindleder



Ortho[®] Standardmodelle Arbeit

Rocky Stahl

Art.-Nr.	45127
Grösse	38–47 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	G / STA
Besonderes	Strapazierfähiger Arbeits-Stabilschuh, mit Stahlkappe, Laufsohle oel- und benzinfest, Rindleder (geprägt), Lederfutter

Rocky

Art.-Nr.	45125
Grösse	4–13
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Strapazierfähiger Arbeits-Stabilschuh, Rindleder (geprägt) Lederfutter
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0006

Rocky Hoch

Art.-Nr.	45150
Grösse	6–13 1/2
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	Strapazierfähiger, extra hoher Arbeits-Stabilschuh, Rindleder (geprägt), Lederfutter
HiMi-Nr. (DE)	31.03.03.0006



Ergänzungen

Ortho Junior

Art.-Nr.	45560
Grösse	28–36 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	JU
Besonderes	Kinder-Stabilschuh, Rindleder



Open Light

Art.-Nr.	40145
Grösse	2–13 nur ganze Grössen
Weite / Leisten	G / J
Besonderes	niedriger Schaft, keine Stabilisatoren, vollständige Öffnung bis zur Schuhspitze, Rindleder (Nubuk, glatt)



Nachtbandage

Ortho Nacht

Art.-Nr.	47150
Grösse	S / M / L
Weite / Leisten	
Besonderes	Die Nachtbandage sorgt für den stabilen 24h Schutz. Nur in Ergänzung zu einem Stabilschuh bestellbar.



Übersicht

	MODEL	ART.-NR.	GRÖSSE	WEITE	LEISTEN
	Ortho Rehab Total	45610	3–14*	G	J
	Ortho Rehab 3	45580	314 ¹	G	J
	Ortho Open	45600	3–14 ^{**1}	G	J
	Ortho Sandale	45590	36–48*	I	SA
	Ortho Standard	45597	2–15	G	J
	Ortho Sportive	40595	2–14 ¹	G	J
	Ortho Klett	45592	3–14 ¹	G	J
	Ortho Donna	45570	2–9	F	TF
	Ortho Volume	45598	36–49* ¹	I	SA
	Black Pro Plus	40593	2½–13	G	J
	Ortho Top	45595	4–13½	G	J
	Ortho Air	45594	3–13	G	J

	MODEL	ART.-NR.	GRÖSSE	WEITE	LEISTEN
	Ortho Aero	45596	2–14 ¹	G	J
	Ortho Eskimo	45581	3–13	G	J
	Ortho Classic	45582	36–47*	H	VZ
	Ortho Safari	45121	3–13	G	J
	Safe3O	45140	37–49* ¹	G	STA
	Safe3Omax	45145	39–49* ¹	K	MX
	Rocky	45125	4–13	G	J
	Rocky Stahl	45127	38–47*	G	STA
	Rocky Hoch	45150	6–13½	G	J
	Ortho Junior	45560	28–36*		JU
	Open Light	40145	2–13*	G	J
	Ortho Nacht	47150	S, M, L**		

* nur ganze Grössen | ** nur in Ergänzung zu einem Stabilschuh bestellbar | ¹ Grössen > 13.5 und > 48 mit Vorlauf bestellbar

Künzli SwissSchuh AG

Hauserstrasse 47
CH-5210 Windisch

T +41 56 200 85 00

F +41 56 200 85 20

info@kuenzli-schuhe.ch
www.kuenzli-schuhe.ch

Künzli SwissSchuh AG | Juni 2015



www.kuenzli-schuhe.ch > Ortho®

